



Brugervejledning

Ilt-koncentrator "DeVilbiss"

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret. Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Hvorfor ordineres supplerende ilt

Mange lider af hjerte-, lunge og andre luftvejssygdomme, og mange af dem kan have gavn af supplerende ilt-behandling, da kroppen kræver en stabil forsyning af ilt for at fungere ordentligt. Din læge har ordineret supplerende ilt til dig, fordi du ikke får nok ilt fra luften alene. Supplerende ilt er ikke afhængighedsskabende.

Hvordan ilt-koncentratoren virker

Ilt-koncentratoren er den mest pålidelige, effektive og praktiske kilde til supplerende ilt-behandling, der er til rådighed i dag. Ilt-koncentratoren er elektrisk drevet. Enheden adskiller ilt fra luften i rummet, der giver mulighed for høj renhed af supplerende ilt. Selvom ilt-koncentratoren filtrerer ilt i et rum, vil det ikke påvirke den normale mængde af ilt i rummet.

Advarsel

1. Placer ilt-koncentratoren således, at dens alarmer kan høres.
2. Placer ikke ilt-koncentratoren i et skab eller i små, indelukkede rum.
3. Placer ilt-slangen, så der ikke opstår knæk så ilten blokeres.
4. Placer ilt-koncentratoren i nærheden af en stikkontakt og mindst 16 cm fra vægge, gardiner og andre objekter, der kan forhindre korrekt lufttilstrømning. Ilt-koncentratoren skal placeres således, at den ikke kommer i kontakt med forurenende emner eller dampe, og enheden skal placeres på et velventileret sted, således at luftindsugningen og -udblæsningen ikke blokeres. Tildæk aldrig koncentratoren med et tæppe, håndklæde, viskestykke m.v., da der i modsat fald kan opstå overophedning.
5. Tilslut ikke ilt-koncentratoren til en forlængerledning. Ingen øvrige apparater bør være sluttet til stikkontakten.

Sikkerhedsforskrifter



Tobaksrygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.

Følg altid lægens ordning af ilt. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret, ilt kan gå i kemisk forbindelse med fedtstofferne.


Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.

Telefon 44 92 35 44

Kend din DeVilbiss


Front

1. Betjeningsvejledning
2. Grøn lys - i drift
3. Afbryder (I = tændt O = slukket)
4. Flowmåler justering
5. Flowmåler, aflæses midt i kuglen
6. Overbelastningssikring
7. Ilt-udtag
8. Normal ilt-forsyning (grøn) lys
9. Low Oxygen (gul) lys
10. Service påkrævet (rød) lys

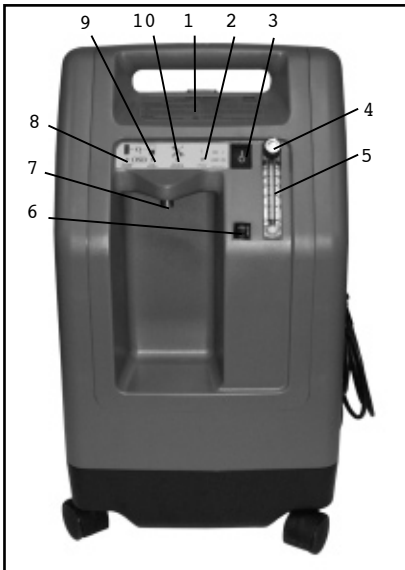

Bagside

11. Dæksel for service
Timetæller
12. Håndgreb
13. Udblæsning
14. Netledning
15. Ledningsrem
16. Luftfilter - forhindrer urenheder i at komme ind i ilt-koncentratoren

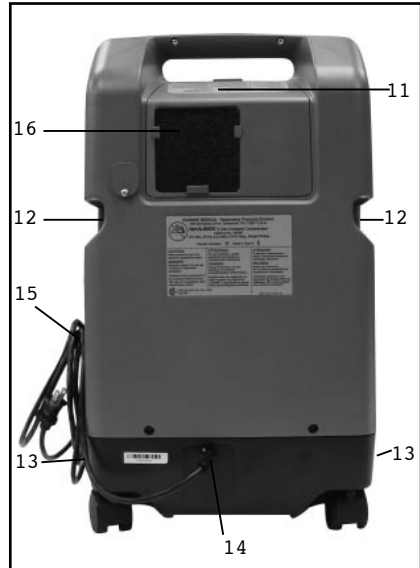

Luftfilter

Luftfilter skal rengøres mindst en gang om ugen

1. Fjern luftfilter, placeret på bagsiden af enheden, se nr. 16 oven for
2. Vask i en opløsning af varmt vand og opvaskemiddel
3. Skyl grundigt med varmt vand fra hanen, tør filteret i et håndklæde. Filteret skal være helt tørt, inden genindsættelse.

FORSIGTIG: For at forhindre skader på produktet, skal du ikke forsøge at betjene enheden uden luftfilter, eller mens filteret stadig er fugtigt.

Mindre fejlfindingsdiagram

PROBLEMER	MULIG ÅRSAG
Koncentratoren fungerer ikke. Strømindikatoren er slukket, når afbryderen er "On". Akustisk alarm er pulserende og "Service påkrævet" blinker.	<ol style="list-style-type: none">1. Netledning ikke sat rigtigt i stikkontakten2. Netledning ikke sat rigtigt i på ilt-koncentratoren3. Ingen strøm på stikkontakten4. Ilt-koncentratoren "afbryder" ikke aktiveret
Koncentratoren er tændt, strømindikatoren er tændt når afbryderen er "On". "Service påkrævet" (rød) lys er tændt. Akustisk alarm kan lyde	<ol style="list-style-type: none">1. Luftfilter er blokeret2. Udstødning er blokeret3. Blokeret eller defekt ilt-kateter/maske4. Blokeret eller defekt befugterflaske5. Flowmåler indstillet for lavt
Koncentratoren er tændt, strømindikatoren er tændt, når afbryderen er "On", hørbar lavfrekvent vibration lyd opdaget	Sluk Ilt-koncentratoren. Skift til dit reserve ilt-system og kontakt VitalAire straks
Både det grønne "normal ilt-indhold" og det gule "lavt ilt-indhold" lys er tændt	OSD fejl. Sluk Ilt-koncentratoren. Skift til dit reserve ilt-system og kontakt VitalAire straks
Gul "lavt ilt-indhold" lyser, eller gul lys og en pulserende akustisk alarm lyder	<ol style="list-style-type: none">1. Luftfilter er blokeret2. Udstødning er blokeret3. Flowmåler indstillet for lavt
"Service påkrævet" (rød) lys er tændt og akustisk alarm	<ol style="list-style-type: none">1. Luftfilter er blokeret2. Udstødning er blokeret3. Flowmåler indstillet for lavt
Ved andre problemer	Kontakt VitalAire straks

Specifikationer

Dimensioner:

H x B x D: (62.2 x 34.2 x 30.4 cm)

Vægt: 16,3 kg.

Lydniveau: 45 dBA i gennemsnit

Iltprocent: 1-5 LPM=93%±3%

Strømforbrug:

310 watt i gennemsnit

275 Watts ved 2.5 LPM & herunder

Den synlige "lav iltindikator" aktiveres på følgende måde:

84% ± 2% (Den akustiske alarm vil advare på ca. 75%. På mindre end 60%, "kræves service" det røde lys vil aktivere.)

Afgangstryk: 8.5 psig (58.6 kPa)

Miljømæssige grænseforhold:

- Apparatet må kun anvendes i lodret position.
- Omgivelsestemperaturer på mellem 5 °C og 35 °C.
- Apparatet må ikke anvendes i fugtige rum.

